

Lumitester Smart & LuciPac A3/Pen



Hızlı Kılavuz

Bu Hızlı Kılavuz, ilk defa kullananların bile Lumitester Smart, LuciPac A3/Pen'i nasıl kullanacağını ve kullanım rahatlığını anlayabilecek şekilde hazırlanmıştır. Reaktiflerin ve ürünün doğru kullanımı ve önlemleri için ilgili kılavuzlara bakın.

Ürünün kullanım kılavuzu aşağıdaki linkten indirilebilir:

<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>

Kikkoman Biochemifa Company



Uygulamayı kullanarak daha akıllı hijyen yönetimi

- 1 Akıllı telefona veya tablete bağlanın.
- 2 Özel uygulama "Lumitester"ı kullanın.
- 3 Uygulama otomatik olarak test sonucunu yansıtır. Geçmiş trendler de kolayca anlaşılabilir.
- 4 Test sonuçları cloud depolama alanına kaydedilir ve birden fazla akıllı cihazdan görüntülenebilir.

1 Paketin içindekiler



3 Çubuk testi nasıl yapılır

- 1 Ürünün güç düğmesini bir süre basılı tutun.
- 2 Uygulamayı başlatın, test noktasını seçin ve ölçümü başlatın.
- 3 Çubuk testini yapın. ("LuciPac A3/Pen" ile ilgili detaylar için kullanım kılavuzuna bakın.)
- 4 Ölçüm haznesi kapağını açın ve hazneye "LuciPac A3/Pen" yerleştirin.
- 5 Ölçüm hazne kapağını kapatın ve START'a basın. Ölçüm başlar. Ölçüm sonucu geri sayımdan sonra görüntülenir.
- 6 Ölçümden sonra "LuciPac A3/Pen" çıkarın. "LuciPac A3/Pen" tüpü ölçüm haznesinden çıkarılmadığında, hata alarmı çalmaya devam eder. "LuciPac A3/Pen"i atarken yerel yönetmeliklere uyun.

4 Uygulama ile sonucu kontrol etme

- 1 Ölçüm sonucu üründen akıllı telefona veya tablete otomatik olarak gönderilir ve uygulamanın test noktasında görüntülenir.
- 2 Test noktasında bir referans değeri ayarlarsanız, geçme/kalma sonucunu hemen belirlemek mümkündür.
- 3 Trend grafiği, her test noktasında otomatik olarak görüntülenir.
- 4 Her test noktasının geçme oranı ve çizelgesi, uygulamanın analiz fonksiyonu ile kontrol edilebilir.

* Uygulama ekranları geliştiriliyor.

Uygulama detayları için, uygulama içindeki Yardım bölümüne bakınız.

2 Kurulum

Pillerin yerleştirilmesi ve Bluetooth'u ON/OFF konumuna getirilmesi

Pil yuvası ve Bluetooth ON/OFF düğmesi pil kapağının içinde bulunur. Bluetooth ON/OFF düğmesinin fabrika gönderim ayarı OFF durumunda.

Pil kapağını açmak/kapatmak için


- 1 Standı açmak için "PUSH"a basılır.
- 2 Kapağı çıkarmak için pil kapağının altındaki işarete basın.



3 Tüm işlemler bittikten sonra pil kapağını tekrar takın.

Pilleri yerleştirin

Kutulara dikkat ederek iki yeni boy AA alkalin pil veya iki şarjlı AA nikel hidrit pil takın.

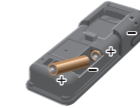

Bluetooth ON/OFF düğmesi

Uygulamayı akıllı telefon ve/veya tablete bağlamak için Bluetooth ON/OFF düğmesini ON konumuna getirin. Ekran kısmında Bluetooth ON işareti görünür.



Dikkat

- Radyo frekans bantları ve kullanılacak iletişim yöntemleri her ülke için tanımlanmıştır. Bazı ülkelere kablosuz cihazların kaydı zorunlu olabilir. Bluetooth'un kullanılacağı ülkeler için aşağıdaki web sitesine bakın. <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>
- Listede olmayan ülkelere, Bluetooth düğmesini OFF konumuna getirin.
- Bluetooth bilgisayara bağlanmak için kullanılmaz. Lütfen verilen USB kablosunu kullanın.

5 Güvenli ve doğru kullanım için önlemler

• Bu ürün ATP Çubuk Testi için tasarlanmıştır. Bu ürünü başka bir amaç için kullanmayın.

Ürünün doğru kullanımı için lütfen dikkatlice okuyunuz.

Bu "Kullanım Önlemleri" bölümü ürünü kullanmadan önce dikkatlice okunmalıdır. Burada listelenen önlem mesajları, önemli güvenlik konularının yanı sıra arızalar ve bozukluklarla ilgilidir.

- ⚠ **Dikkat** Ürünü düzgün şekilde kullanılmaması, yaralanmalara veya hasarlara yol açabilir.
- 🚫 **Yasak** Ürünü kullanırken nelerin yasak olduğunu (yapılmaması gerektiğini) gösterir.

⚠ Dikkat	
<p>Ürünü sökmeyin veya değiştirmeyin. Yangın, elektrik çarpması veya arızaya neden olabilir.</p>	<p>Islak ellerle dokunmayın. Elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.</p>
<p>Gösterge ve çalıştırma panelini sert veya keskin nesnelere itmeyin ve ovmayın. Yaralanmaya veya arızaya neden olabilir.</p>	<p>Belirtilenler dışındaki pilleri kullanmayın (AA alkalin piller veya AA nikel hidrit piller). Yangın, yaralanma veya arızaya neden olabilir.</p>
<p>Ürünü temizlemek için organik çözücü kullanmayın. Yangın, elektrik çarpması veya arızaya neden olabilir.</p>	<p>Ürün uzun bir süre saklanacaksa pilleri çıkarın. Piller çıkarılmazsa sızıntı ve patlamaya neden olabilir.</p>
<p>Ürünü doğrudan güneş ışığına, toza ve/veya yüksek sıcaklığa/neme maruz kalan yerlerde kullanmayın veya saklamayın. Yangın veya arızaya neden olabilir.</p>	<p>Ürünü, sıcaklığın yüksek olduğu yerlere (ateşin yanına, ısıtıcının yanına veya kavurucu güneşin altına) koymayın. Ateşe, yangına veya arızaya neden olabilir.</p>

Bu Hızlı Kılavuz, akıllı telefon ve/veya tabletin ürüne nasıl bağlanacağını açıklar. Ölçüm sadece ürün ve "LuciPac A3/Pen" kullanılarak da alınabilir. Bir bilgisayar ile bağlanarak veya yalnızca ürünü kullanarak ölçüm yaparken Kullanım Kılavuzuna bakın.

Uygulamayı kullanın (ücretsiz)



1 Uygulamayı akıllı telefon veya tablete QR kodu veya URL ile indirin <http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/support/dl/smart>




2 Uygulamayı kurmak için uygulamayı başlatın ve ekrandaki talimatları izleyin. Uygulamayı ilk kez kullanın için ilk kayıt gereklidir. Kayıtlı kullanıcılar kimliklerini ve şifrelerini girerek giriş yapabilirler.



3 Akıllı cihaz bağlantı ekranı görüldüğünde, ürünü çalıştırın. Bluetooth ON konumunda değilse, kurulum ekranından ON olarak ayarlayın.



4 Uygulama ekranından ürünün seri numarasını seçin. Otomatik olarak zaman ve tarih ayarlaması ve ölçüm verilerine tarih atılmasını sağlar.

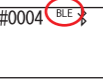

5 Bağlantı kurulduğunda, durum göstergesinde BLE görüntülenir.

6 Ana ekran görüldüğünde, akıllı telefon/tablet ve ürün kullanıma hazırdır.

Uygulama detayları için, uygulama içindeki Yardım bölümüne bakınız.

6 Satış sonrası servis

Garanti

Lumitester Smart için garanti süresi satın alındığı tarihten itibaren bir yıldır. Bununla birlikte, 1999/44/EC sayılı AB Direktifinin yürürlükte olduğu AB üye ülkelerinde, satın alma tarihinden itibaren iki yıldır. Garantinin başlangıç tarihini doğrulamak için, lütfen satın alma tarihini doğrulayabilecek belgeleri (teslimat faturası gibi) saklayın. Garanti süresi içinde bir arıza meydana gelirse, ya ücretsiz bir onarım apacağız ya da yedek parça temin edeceğiz. Ancak, tazminat, bu ürünün malzemesindeki veya üretimdeki kusurlardan kaynaklanan arızalarla sınırlıdır. Ayrıca, tazminat döneminde dahi aşağıdakilerin garanti kapsamında olmadığını unutmayın.

- 1 Satın alma tarihini doğrulayabilecek belge veya kayıt olmadığında.
- 2 Bir kusurun var olup olmadığına bakılmaksızın, hafıza verilerinin ve ayar verilerinin bir PC'de görüntülenememesi veya yüklenememesi nedeniyle kayıt içeriğinin kaybı.
- 3 Bu kullanım kılavuzunun açıklamasına aykırı kullanım, dikkatsiz kullanımdan kaynaklanan arıza, ürünün değiştirilmesi ya da başka bir şekilde yeniden modellenmesi ya da insan kontrolünün dışındaki doğal bir felaketten kaynaklanan hasarlar vb.

Bu ürünün arızalanması ile ilgili tazminat kapsamı, bu garanti kapsamındaki teminatlarla sınırlıdır, dolaylı ya da özel kayıp veya zarar dahil olmak üzere diğer herhangi bir kayıp ya da hasar, tazminat kapsamına dahil değildir.

Performans iyileştirme amaçlı, şartname, haber vermeksizin değiştirilebilir.

Yayıncı:

Kikkoman Biochemifa Company
2-1-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0003, Japan
TEL:+81-3-5521-5481 FAX:+81-3-5521-5498
<http://biochemifa.kikkoman.co.jp/e/>